

Subiton VTP

Vertebroplastía Percutánea >> Percutaneous Vertebroplasty



Subiton VTP

Cement for Percutaneous Vertebroplasties

Subiton VTP cement has been specially designed for percutaneous vertebroplasties, with ideal working time, adequate viscosity and high opacity to X rays.



Subiton VTP

- 2 double envelopes containing 12.5 g of radioopaque powder sterilized with ethylene oxide.

- 2 ampoules with 5 ml of liquid sterilized by ultrafiltration.

Subiton VTP 1 Dose

- 1 double envelope containing 12.5 g of radioopaque powder sterilized with ethylene oxide.

- 1 ampoule with 5 ml of liquid sterilized by ultrafiltration.

Advantages

- Easy preparation and injection.
- Low viscosity.
- No need to add contrasting, dissolvent or retarding agents
- Constant working time.
- Unharmful exothermal reaction and excellent mechanical properties
- Enables exact control of injection with X Rays with less exposure of patient and medical staff.

Presentation

Subiton VTP cement for Vertebroplasty is available in two types, inside a blister sterilized with ethylene oxide.

Directions for Use

- Fracture / painful collapse of a vertebral body due to osteoporosis, absence of analgesic response or inadequate response to the analgesic treatment.
- Painful vertebral fracture secondary to a benign or malignant tumor: hemangioma, myeloma or metastatic lesions.
- Painful vertebral fracture secondary to osteonecrosis (Kummel disease)
- Unstable fracture by compression with radiological evidence of movement at the wedge.
- Presurgical vertebral reinforcement: unstable patients, loss of substance or bone destruction secondary to osteoporosis or tumors.
- Patients with multiple vertebral collapses, with potential compromise of the respiratory function

Set Subiton VTP

Sterile cement application system specially designed for percutaneous vertebroplasties; the elements were manufactured with non-toxic polymers and copolymers and surgical stainless steel.

Presentation

Subiton Set VTP is available in a case with the Directions for Use and a double blister with the set sterilized with ethylene oxide gas.


Description

Subiton Set VTP includes:

- 1 Puncturing cannula for vertebral body with mandrel: 2.4 mm x 100 mm, 3.0 mm x 100 mm or 3.0 mm x 150 mm
- 1 Connecting tube Luer Lock, male / female
- 1 Syringe body for 10 ml
- 1 Plunger for syringe
- 1 Mixing bowl
- 1 Spatula
- 1 Cannula for cement suctioning
- 1 Surgical hammer.



Sistema Aplicador de Cemento para Vertebroplastías Application System for Vertebroplasty Cement

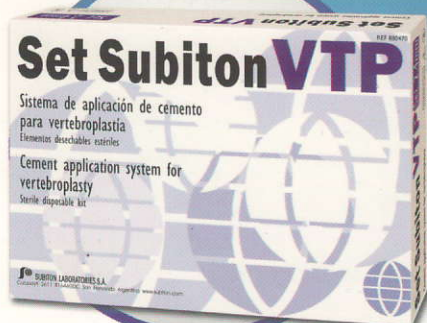

Set Subiton VTP

Sistema estéril de aplicación de cemento especialmente diseñado para vertebroplastías percutáneas, sus elementos fueron elaborados con polímeros y copolímeros atóxicos y acero inoxidable quirúrgico.

Sterile system for cement application, specially designed for percutaneous vertebroplasties; components manufactured with atoxic polymers and copolymers, and surgical stainless steel.

Presentación Presentation

El Set Subiton VTP se presenta en un estuche que contiene las instrucciones de uso y un blister con el set esterilizado por el método de gas óxido de etileno.

Subiton VTP Set is supplied in a case including instructions for use and a blister containing the set sterilized by the ethylene oxide gas method.

Descripción Description

El Set Subiton VTP consta de:

1 Cánula de punción de cuerpo vertebral con mandril:
2,4 mm x 100 mm, 3,0 mm x 100 mm o 3,0 mm x 150 mm.

1 Tubo conector Luer Lock Macho / Hembra.

1 Cuerpo de jeringa de 10 ml.

1 Émbolo para jeringa.

1 Recipiente de mezclado.

1 Espátula.

1 Cánula para succión de cemento.

1 Martillo quirúrgico.

Subiton VTP Set is comprised of:

1 Puncturing cannula for vertebral body with mandrel:
2.4 mm x 100 mm, 3.0 mm x 100 mm or 3.0 mm x 150 mm.

1 Connecting tube Luer Lock, male / female.

1 Syringe body for 10 ml.

1 Plunger for syringe.

1 Mixing bowl.

1 Spatula.

1 Cannula for cement suctioning.

1 Surgical hammer.

